

Tillägg till ZOLL® AED Plus® Administratörshandbok



Viktigt: Denna symbol anger att AED Plus-enheten är utrustad för behandling av vuxna och barn. En AED Plus-enhet utan denna symbol är inte utrustad för behandling av barn och kommer *inte* att fungera med Pedi-padz® II pediatriiska elektroder. En AED Plus-enhet kan uppgraderas för användning med ZOLL Pedi-padz II pediatriiska elektroder genom att kontakta ZOLL Medical Corporation eller en auktoriserad ZOLL-distributör för att få information om ZOLL AED Plus pediatriiska uppgraderingssats.

Om en AED Plus-enhet är utrustad för behandling av vuxna och barn när du ansluter kabeln för vuxen-elektroder, växlar AED Plus-enheten automatiskt till vuxenläge för detektion av hjärtrytm och automatiskt val av shockenergi (120 joule, 150 joule, 200 joule), visar uppmaningen **VUXEN-ELEKTRODER** och avger tre ljudsignaler. När du ansluter kabeln för ZOLL Pedi-padz II pediatriiska elektroder växlar AED Plus-enheten automatiskt till pediatriiskt läge för detektion av hjärtrytm och automatiskt val av shockenergi (50 joule, 70 joule, 85 joule), visar uppmaningen **PEDIATRISKA ELEKTRODER** och avger tre ljudsignaler.

Sätta fast Pedi-padz II-elektroder (för spädbarn/barn)


Förbered patienten innan Pedi-padz II-elektroderna sätts fast.

Så här förbereder du patienten:

1. Ta bort alla kläder som täcker patientens bröst.
2. Kontrollera att patientens bröst är torrt.

Så här sätter du fast Pedi-padz II-elektroderna:

1. Riv upp elektrodförpackningen och vik ut den inre förpackningen för att frilägga elektroderna. Placera elektroderna på patienten enligt bilderna på elektrodförpackningen.
2. Avlägsna den runda elektroden från skyddsfilmerna och placera den på patientens bröst (enligt bilden på elektrodförpackningen).
3. Placera handen på elektrodens kant och rulla försiktigt fast elektroden på patientens bröst med den andra handen. Pressa efterhand ut luft som eventuellt finns under elektroden.
4. Rulla över patienten på bröstet och avlägsna den fyrkantiga elektroden från skyddsfilmerna och placera den på patientens rygg (enligt bilden på elektrodförpackningen).
5. Placera handen på elektrodens kant och rulla försiktigt fast elektroden på patientens hud med den andra handen. Pressa efterhand ut luft som eventuellt finns under elektroden.
6. Rulla över patienten på rygg och följ uppmaningarna för ZOLL AED Plus.

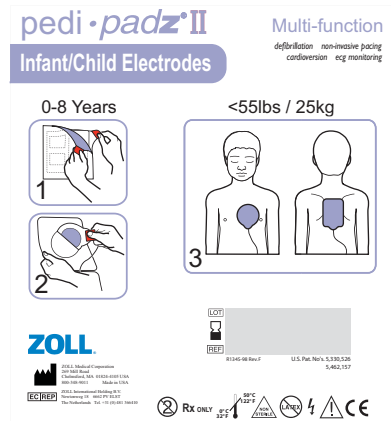

OBS! Du kan också använda Pedi-padz II (elektroder för spädbarn/barn) med ZOLL pacemaker-produkter under upp till en timmes pacing (se *Bruksanvisning till M Series* för information om pacing).

Indikationer för användning

Använd ZOLL AED Plus när en patient med misstänkt hjärtstillestånd har en uppenbar CIRCULATIONSBRIST som ytttrar sig i:

- medvetslöshet och
- frånvaro av normal andning och
- frånvaro av puls eller tecken på cirkulation.

När patienten är yngre än 8 år och väger mindre än 25 kg (55 lbs) ska ZOLL AED Plus användas med ZOLL AED Plus pediatriiska elektroder. Fördröj inte behandlingen för att fastställa patientens exakta ålder eller vikt.